

**Dr. pen**

Auto Microneedle System



**Руководство  
пользователя A11**

RU

Прочтите руководство перед использованием



Описание изделия.....	2
Наименование деталей.....	3
Инструкция для беспроводного режима .....	4
Как зарядить аккумулятор.....	4
Как применять картридж.....	5
Регулировка длины.....	6
Отображение и регулировка скорости .....	6
Как использовать подставку. ....	7
Виды картриджей.....	8
Справочная таблица .....	9
Технические характеристики .....	9
Меры предосторожности .....	10
Гарантия.....	11




Прибор для микромассажной терапии с помощью вибрации.

Прибор помогает более эффективно использовать антивозрастные сыворотки на поверхности кожи за счет быстрых микромассажных поступательных движений. В результате чего, происходит выработка собственного коллагена и быстрое впитывание сыворотки в кожу. Без инъекций!

Для устройства разработано 7 различных типов картриджей. Без инъекций!

## Наименование деталей

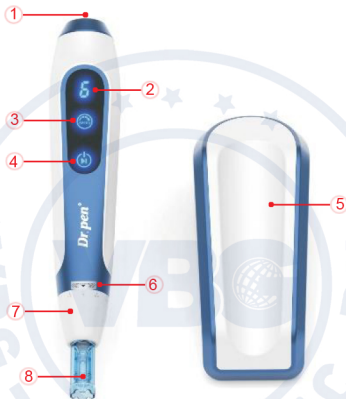

- |   |                          |   |                                      |
|---|--------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Интерфейс питания        | 2 | Экран отображения скорости           |
| 3 | Регулировка скорости     | 4 | Кнопка питания<br>Кнопка пуска/паузы |
| 5 | Подставка                | 6 | Деление шкалы                        |
| 7 | Кольцо регулировки шкалы | 8 | Картридж                             |

Данное устройство работает от встроенного аккумулятора. Оно может работать без провода. Кабель питания и адаптер используются для зарядки устройства, когда аккумулятор разряжен.


### Как зарядить аккумулятор


Подключите кабель питания с адаптером к интерфейсу питания устройства и подключите адаптер к находящейся под напряжением розетке переменного тока, чтобы зарядить устройство. Зарядка завершится примерно через 3 часа.


Индикатор скорости медленно мигает, когда оставшийся уровень заряда аккумулятора падает до 10 %.

Ручка автоматически выключится после того, как индикатор скорости быстро замигает в течение 1 минуты.



Ручка показывает «» при перезапуске после автоматического отключения из-за низкого заряда аккумулятора.

Ручка показывает вращающийся символ «» во время зарядки.


Ручка показывает «» после завершения зарядки.

1. Достаньте картридж из стерилизованной упаковки (рис. 1).



(рис. 1)

2. Найдите U-образную выемку на картридже, совместите выемку с точкой на нижней части устройства и легким движением вставьте картридж в устройство. (Рис. 2)

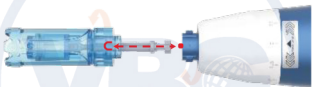

(рис. 2)

3. Зафиксируйте картридж на устройстве, повернув его по часовой стрелке.
4. Для извлечения картриджа поверните его против часовой стрелке и вытащите
5. Запускайте устройство только в том случае, если картридж собран правильно. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3-5 секунд, чтобы включить/выключить устройство.

**Перед установкой картриджа, убедитесь, что U-образный конец картриджа совмещен с U-образной выемкой ручного блока.**

**Картридж предназначен для одноразового использования.**

Поместите использованные картриджи в мусорный контейнер. Если картридж случайно загрязнился во время установки (т. е. упал на пол, упаковка вскрыта/повреждена. Картридж может быть загрязнен). Пожалуйста, выбросьте его и используйте или приобретите новый.

**Используйте подходящую глубину, в зависимости от области обработки и проблемы с кожей.**

Отрегулируйте глубину, поворачивая кольцо регулировки шкалы. Глубину следует отрегулировать после запуска ручки. Номер шкалы, совпадающий с делением шкалы, показывает текущую глубину (Рис. 3)



(рис. 3)

### Отображение и регулировка скорости

**Экран отображения скорости**



**6 уровней скорости**

Нажмите и удерживайте кнопку питания 3 секунды, чтобы запустить или выключить устройство. После запуска устройства при каждом нажатии на кнопку «Регулировка скорости» будет происходить изменение скорости.

**После включения устройства:**

Нажмите кнопку питания для пуска или приостановки устройства.

В работающем состоянии:

Индикаторная лампа кнопки питания горит постоянно.

В состоянии ожидания:

Индикаторная лампа кнопки питания непрерывно мигает.

В работающем состоянии устройство автоматически перейдет в режим ожидания, когда его поставят на подставку.




В работающем состоянии устройство автоматически снова начнет работать, когда его снимут с подставки.







### Доступные картриджи

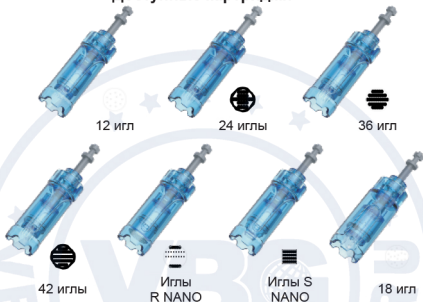

### Внимание

Данные картридж предназначены только для Dr.pen A9, A11, A8S, M8S.

Картридж одноразовый.

Выбрасывайте использованный картридж в мусорный контейнер.



ОБЛАСТЬ	ГЛУБИНА ИГЛЫ (мм)
Лоб	0,25–0,5
Между бровями	0,25–0,5
Нос	0,25
Вокруг валика глазницы	0,25
Щеки и подбородок	0,5–1,0

### Технические характеристики

Название изделия:

Прибор для микромассажной терапии с помощью вибрации

Название модели: Dr.pen A11

Адаптер

Вход: 100–240 В, 50–60 Гц. Выход: 5 В, 1 А




















Вес упаковки: 625 г

Размер упаковки: 194\*146\*67 мм

### Комплектация

Позиция	Кол-во
Аппарат	1 шт.
Адаптер питания	1 шт.
Руководство	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Игольчатый картридж	2 шт.
Подставка	1 шт.

## Меры предосторожности

	Обязательно ознакомьтесь с настоящими инструкциями перед использованием прибора и следуйте им.		
	<b>Противопоказания:</b> 1. Острые заболевания или заболевания крови, сопровождающиеся температурой выше 38 °C 2. Аллергия и гемофилия 3. Меланоз на лице 4. Высокая температура 5. При постоянном приеме лекарственных препаратов, требуется консультация врача 6. Возраст до 18 лет		
	Не подключайте прибор к питанию, отличному от 220 В переменного тока. Это может привести к возгоранию или неисправности.		
	Не используйте его в местах с высокой температурой, пыльных помещениях или при высокой влажности (возле увлажнителя). Это может привести к неисправности.		
	Не ремонтируйте, не разбирайте и не меняйте контроллер и корпус. Это может привести к неисправности.		
	Не прикасайтесь к устройству и не отсоединяйте шнур питания мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.		
	Не используйте оголенный или поврежденный шнур. Это может привести к возгоранию (обязательно замените его на новый).		
	Не используйте поврежденный шнур, который имеет трещины или задиры. Они могут оцарапать кожу.		
	Если вы не используете прибор в течение длительного времени, отключите его от розетки.		
	Обязательно пройдите технический контроль для проверки. Если обнаружены какие-либо неисправности, отремонтируйте прибор.		
	Никто, кроме оператора не может прикасаться к прибору. Это может привести к несчастным случаям или неисправности.		
	Переменный ток		Серийный №
	Постоянный ток		Производитель
	Дата изготовления		Маркировка CE
	Внимание! Обратитесь к сопроводительной документации		Обратитесь к инструкции по использованию



Гарантийный период изделия составляет 12 месяцев. Мы предлагаем услугу ремонта, начиная с даты покупки. В случае если наша продукция имеет повреждения или неисправности естественного характера, мы предоставляем замену или ремонтное обслуживание. Применение сторонних картриджей может вызвать повреждение изделия и привести к отмене гарантии.

### **Общее техническое обслуживание**

Обязательно осмотрите устройство и адаптер перед использованием.

Убедитесь, что устройство выключено, когда оно не используется. Протрите его поверхность дезинфицирующими салфетками.

Обязательно очистите такие области, как щели, швы и области вокруг места крепления игольчатого картриджа к устройству.

Держите устройство вдали от прямых солнечных лучей, высокой температуры и влажности.

Не доверяйте выполнение измерений, ремонта или модификации устройства непрофессионалам.

Если вы не использовали устройство в течение длительного времени, убедитесь, что оно работает должным образом и безопасно.

***Dr. pen*** 

**A11** РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ