

Dr. pen  [®]
Auto Microneedle System 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ **M8S**

Пожалуйста, прочтите руководство
перед использованием



Описание продукта	2
Наименование деталей	3
Беспроводной режим	4
Как зарядить устройство	4
Как установить картридж	5
Регулировка длины	6
Отображение скорости	6
Виды картриджей	7
Справочная информация	8
Спецификация	8
Меры предосторожности	9
Гарантия.....	10



Прибор для микромассажной терапии с помощью вибрации.

Прибор помогает более эффективно использовать антивозрастные сыворотки на поверхности кожи за счет быстрых микромассажных поступательных движений. В результате чего, происходит выработка собственного коллагена и быстрое впитывание сыворотки в кожу. Без инъекций!

Для устройства разработано 7 различных типов картриджей. Без инъекций!





Это устройство питается от встроенной батареи. Устройство может работать по беспроводной сети. Кабель питания и адаптер используются для зарядки устройства, когда в нем разряжена батарея.



Как зарядить устройство

Подключите устройство к адаптеру с помощью кабеля питания и подключите адаптер к сетевой розетке, чтобы зарядить устройство. Зарядка будет завершена в течение 2 часов.

Состояние зарядки

Количество оборотов медленно мигает, когда емкость аккумулятора остается на 10%.

Ручка автоматически выключится через 1 минуту, пока количество оборотов быстро мигает.



Пожалуйста, зарядите

аккумулятор, когда ручка
покажет "L"



Ручка показывает
вращение "0" во время зарядки.




Ручка покажет
"F" когда зарядка будет
завершена.






Подготовка

1. Выньте картридж из стерилизованной упаковки. (Рис. 1)

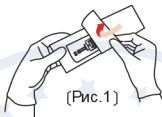

2. Найдите U-образную выемку на картридже, совместите выемку с точкой на нижней части устройства и легким движением вставьте картридж в устройство. (Рис. 2)

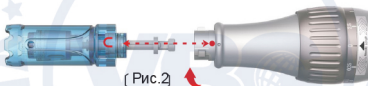

3. Зафиксируйте картридж на устройстве, повернув его по часовой стрелке.
Для извлечения микроигльчатого картриджа поверните его против часовой стрелки и вытащите. Запускайте устройство только в том случае, если картридж собран правильно.
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3-5 секунд, чтобы включить/выключить устройство.

Перед установкой картриджа, убедитесь, что U-образный конец картриджа совмещен с U-образной выемкой ручного блока. Картридж предназначен для одноразового использования. Поместите использованные картриджи в мусорный контейнер. Если картридж случайно загрязнился во время установки (т. е. упал на пол, упаковка вскрыта/повреждена. Картридж может быть загрязнен). Пожалуйста, выбросьте его и используйте или приобретите новый.



Используйте подходящую глубину, в зависимости от области обработки и проблемы с кожей.

Отрегулируйте глубину, повернув регулировочное кольцо шкалы. Глубину введения следует отрегулировать после запуска пера. Номер шкалы, совпадающий с точкой шкалы, показывает текущую глубину. (Рис. 4)



Отображение скорости

Дисплей скорости



6 Уровней скорости

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы запустить или выключить устройство. После запуска устройства скорость изменяется один раз при каждой нажатии кнопки питания.



Виды картриджей (приобретаются отдельно)

7

Доступные игольчатые картриджи



12 Игл



24 Иглы



36 Игл



42 Иглы



RNANO



SNANO



18 Игл



Внимание

Данные картридж предназначены только для Dr.pen A9, A11, A8S, M8S.

Картридж одноразовый.

Выбрасывайте использованный картридж в мусорный контейнер.





Зона воздействия	Глубина Игл (ММ)
Лоб	0.25 - 0.5
Между бровей	0.25 - 0.5
Нос	0.25
Область вокруг глаз	0.25
Щеки и подбородок	0.5 - 1.0



Характеристики

Наименование:

Прибор для микромассажной терапии с помощью вибрации

Модель: Dr.pen M8S

Адаптер

Входное напряжение: 100-240V 50-60HZ

Выходное напряжение: 5V 1A

Вес: 400 г

Размер упаковки: 169x123x56 мм

Упаковочный лист

Позиция	Количество
Аппарат	1 шт
Адаптер питания	1 шт
Инструкция	1 шт
Кабель питания	1 шт
Картридж	2 шт



	Обязательно ознакомьтесь с настоящими инструкциями перед использованием прибора и следуйте им.		
	Противопоказания: 1. Острые заболевания или заболевания крови, сопровождающиеся температурой выше 38 °C 2. Аллергия и гемофилия 3. Меланоз на лице 4. Высокая температура 5. При постоянном приеме лекарственных препаратов, требуется консультация врача 6. Возраст до 18 лет		
	Не подключайте прибор к питанию, отличному от 220 В переменного тока. Это может привести к возгоранию или неисправности.		
	Не используйте его в местах с высокой температурой, пыльных помещениях или при высокой влажности (возле увлажнителя). Это может привести к неисправности.		
	Не ремонтируйте, не разбирайте и не меняйте контроллер и корпус. Это может привести к неисправности.		
	Не прикасайтесь к устройству и не отсоединяйте шнур питания мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.		
	Не используйте оголенный или поврежденный шнур. Это может привести к возгоранию (обязательно замените его на новый).		
	Не используйте поврежденный шнур, который имеет трещины или задиры. Они могут оцарапать кожу.		
	Если вы не используете прибор в течение длительного времени, отключите его от розетки.		
	Обязательно пройдите технический контроль для проверки. Если обнаружены какие-либо неисправности, отремонтируйте прибор.		
	Никто, кроме оператора не может прикасаться к прибору. Это может привести к несчастным случаям или неисправности.		
	Переменный ток		Серийный №
	Постоянный ток		Производитель
	Дата изготовления		Маркировка CE
	Внимание! Обратитесь к сопроводительной документации		Обратитесь к инструкции по использованию



Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев. Мы предлагаем услуги по ремонту с момента покупки. Если какой-либо из наших продуктов имеет повреждения или естественные неполадки, мы предоставляем услуги по замене или ремонту. Использование картриджей сторонних производителей может привести к повреждению устройства. Это может привести к аннулированию гарантии.

Техническое обслуживание

Обязательно осмотрите устройство и адаптер перед использованием.

Убедитесь, что устройство выключено, когда оно не используется. Протрите его поверхность дезинфицирующей салфеткой.

Обратите внимание на чистоту участков, таких как щели, швы и области вокруг места крепления игольчатого картриджа к устройству.

Храните его вдали от прямых солнечных лучей, высокой температуры или влажности.

Не поручайте диагностику, ремонт или переделку устройства непрофессиональному персоналу.

При использовании устройства, которое не использовалось в течение длительного времени, обязательно проверьте, правильно ли оно работает с точки зрения безопасности.

Dr. pen 

M8S Руководство
пользователя